SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

# 현장을 이해하고, 필요한 솔루션을 연결합니다.

산업안전 · 추락방지 시스템
산업용 소재 · 건축자재
제품 제안부터 공급·시공·설치·교육까지




COMPANY INFORMATION

**스냅슛 (SNAPSHOOT)**

ADDRESS (15431) 경기도 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 301동 118호
TEL 0507-1374-9229
FAX 0504-481-6749
E-MAIL bkkim@snapshoot.co.kr

TECHNICAL DOCUMENTS

## 인증서 · 데이터시트 · 기술자료

제품의 규격과 성능, 인증 및 적용 조건을 확인하기 위한 자료입니다.

ABOUT SNAPSHOOT

### 제품 공급을 넘어, 현장에 맞는 해결책으로

스냅슛은 산업현장의 작업 환경과 요구 조건을 바탕으로
적합한 제품과 시스템을 제안합니다. 현장 실사를 통해 설치 조건을 확인하고,
공급부터 시공·설치 및 사용 교육까지 필요한 과정을 함께합니다.

**추락방지 시스템**

안전대부착설비 · 수평·수직 라이프라인
레일 시스템 · 리지드 포스트

**밀폐공간 진입·구조 솔루션**

데빗암 · 삼각대 · 구조용 윈치
윈치 안전블록 · 구조장비

**산업안전 보호구**

전신형 안전대 · 랜야드 · 안전블록
작업 환경에 맞춘 개인보호구

**산업용 소재·건축자재**

산업용 테이프 · 접착제 · 기능성 소재
구조용 스크류 · 목조건축 자재

SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

홈페이지 바로가기 →
문서 라이브러리 바로가기 →
시공사례 바로가기 →
문의하기 →

본 페이지는 스냅슛의 자료 제공 안내용 표지입니다. 첨부된 인증서 및 기술자료의 발행 주체, 인증 대상과 적용 범위는 해당 원문을 기준으로 확인해 주세요.




NEOGEN

# NeoSal®

## *Simplifying Oral Fluid Collection*

NEOGEN® is proud to announce the release of our NeoSal® Oral Fluid Collection System. Our oral fluid collection system is designed for maximum ease of use at the collection site and testing laboratory.

### Confident Collection

- Sample volume adequacy indicator: Ensures appropriate and consistent sample volume is collected.
- Stimulant-free collection pad: Collects sufficient volume without artificial stimulants.
- Quick collection: Typical collection time is 1–2 minutes.

### Engineered Ease of Use

- Unique collector handle design: Handle remains outside of the buffer tube, reducing risk of sample contamination and forming a leak-proof seal for long term storage.
- No additional processing: No centrifugation or plunging necessary, discard collection pad and process sample.
- Automation friendly: Buffer tube fits onto most standard automated instrument sample racks (12 x 75), eliminating transfer to additional tube.
- Additional cap: Designed for long-term storage, stores in bottom of tube when not in use.

### Optimized Performance

- Oral fluid ELISA kits: Optimized with the NeoSal, samples can be assayed without additional sample preparation.
- Drug recovery: Innovative proprietary buffer extracts adequate analyte concentration for consistent detection.
- Sample stability: Buffer contains microbial growth inhibitors and ensures stability of the sample during transport.
- Compatibility: NeoSal buffer is compatible with liquid chromatographic separation approaches and mass spectrometer detection methods.

### Oral Fluid Collection System Ordering Information

| Product | Available Sizes | Product No. |
|---|---|---|
| NeoSal Oral Fluid Collection System | 25 pack | 128101-25 |
| NeoSal Buffer | 500 mL<br>1 L | 120176<br>120177 |
| Buffer Tube caps | 25 pack | 128102-25 |

**Call 800.477.8201 to order or visit NEOGEN.com**




©NEOGEN Corporation, 2021. NEOGEN and NeoSal are registered trademarks of NEOGEN Corporation, Lansing, MI 48912 U.S.


*Simplifying Oral Fluid Collection*

## Simple Collection Process


The NeoSal Oral Fluid Collection System is designed for maximum ease of use at the collection site and testing laboratory. Collection is completed with these steps:

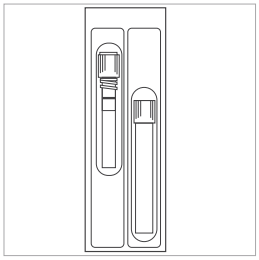


Peel open package and remove collector. Do not eat or drink at least 15 minutes prior to collection.

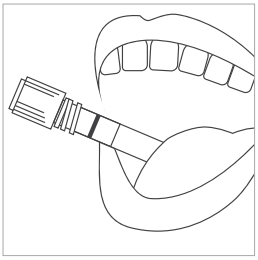


Pool saliva in mouth. Insert collector pad in mouth between cheek and gum.

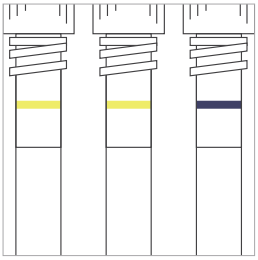

When a distinct blue line forms, remove collector from mouth. Typical collection time is 1–2 minutes.

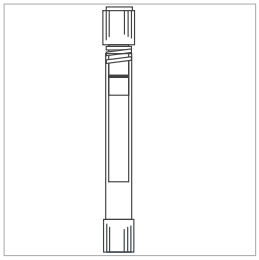

Remove blue cap and snap into bottom of the tube. Insert saturated collector pad into tube.

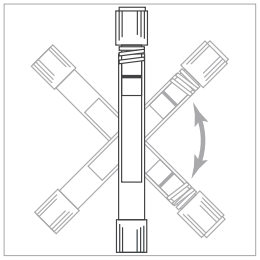

Tighten white cap. Gently invert tube 4 or 5 times. Send sample to testing laboratory.

## NEOGEN's Drug Detection (Ready to Use) Forensic Assays

NEOGEN's forensic drug detection immunoassays include more than 100 ELISA test kits to screen over 300 drugs and metabolites in a wide range of forensic samples including whole blood, urine, oral fluid, and others.

| ELISA Test Kits | Product No. |
|---|---|
| 6-AM | 134019 |
| Acetaminophen | 132419 |
| Amphetamine Specific-2 | 132319-2 |
| Amphetamine Ultra | 130819 |
| Barbiturate Group | 130619 |
| Benzodiazepine Group (oxazepam/clonazepam) | 130119 |
| Buprenorphine | 131919 |
| Carisoprodol | 132519 |
| Citalopram | 132719 |
| Cocaine/Benzoylecgonine-2 | 130319-2 |
| Dextromethorphan | 131419 |
| Fentanyl | 131519 |
| Hydromorphone | 132219 |
| Ketamine | 131719 |
| LSD | 130219 |
| Meperidine | 131219 |
| Methadone | 131619 |
| Methadone/LAAM | 132919 |
| Methamphetamine/MDMA | 130919 |
| Methylphenidate/Ritalinic Acid | 134219 |
| Naltrexone/Nalbuphine | 133019 |
| Opiate Group | 130419 |
| Oxycodone/Oxymorphone | 130719 |

| ELISA Test Kits | Product No. |
|---|---|
| Phencyclidine (PCP) | 130519 |
| Phenytoin | 132119 |
| Propoxyphene | 131119 |
| Salicylates | 133619 |
| Sertraline | 131319 |
| Synthetic Cannabinoids (JWH-018) | 133519 |
| Synthetic Cannabinoids (JWH-250) | 133719 |
| Synthetic Cannabinoids (UR-144/XLR-11) | 133919 |
| Synthetic Cathinones (Methcathinone) | 181819 |
| THC | 131019 |
| Tramadol | 131819 |
| Trazodone | 132819 |
| Tricyclics Group | 132019 |
| Zolpidem | 132619 |

| Oral Fluid ELISA Kits | Product No. |
|---|---|
| Cocaine/BZE | 120119 |
| Methamphetamine/MDMA | 120219 |
| Opiates | 120319 |
| PCP | 120419 |
| THC | 120519 |
| Oral Fluid Multi-Analyte Calibrator Set | 128100 |

See additional kits at NEOGEN.com

**FORENSIC USE ONLY**

**Call 800.477.8201 to order or visit NEOGEN.com**

NEOGEN®
NEOGEN.com

©NEOGEN Corporation, 2021. NEOGEN and NeoSal are registered trademarks of NEOGEN Corporation, Lansing, MI 48912 U.S.