SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

현장을 이해하고, 필요한 솔루션을 연결합니다.

산업안전 · 추락방지 시스템
산업용 소재 · 건축자재
제품 제안부터 공급·시공·설치·교육까지



COMPANY INFORMATION

스냅슛 (SNAPSHOOT)

ADDRESS (15431) 경기도 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 301동 118호
TEL 0507-1374-9229
FAX 0504-481-6749
E-MAIL bkkim@snapshoot.co.kr

TECHNICAL DOCUMENTS

인증서 · 데이터시트 · 기술자료

제품의 규격과 성능, 인증 및 적용 조건을 확인하기 위한 자료입니다.

ABOUT SNAPSHOOT

제품 공급을 넘어, 현장에 맞는 해결책으로

스냅슛은 산업현장의 작업 환경과 요구 조건을 바탕으로
적합한 제품과 시스템을 제안합니다. 현장 실사를 통해 설치 조건을 확인하고,
공급부터 시공·설치 및 사용 교육까지 필요한 과정을 함께합니다.

추락방지 시스템

안전대부착설비 · 수평·수직 라이프라인
레일 시스템 · 리지드 포스트

밀폐공간 진입·구조 솔루션

데빗암 · 삼각대 · 구조용 윈치
윈치 안전블록 · 구조장비

산업안전 보호구

전신형 안전대 · 랜야드 · 안전블록
작업 환경에 맞춘 개인보호구

산업용 소재·건축자재

산업용 테이프 · 접착제 · 기능성 소재
구조용 스크류 · 목조건축 자재

SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

홈페이지 바로가기 →
문서 라이브러리 바로가기 →
시공사례 바로가기 →
문의하기 →

본 페이지는 스냅슛의 자료 제공 안내용 표지입니다. 첨부된 인증서 및 기술자료의 발행 주체, 인증 대상과 적용 범위는 해당 원문을 기준으로 확인해 주세요.

Test Type Package Update


A test type package update, **ANSR 20180315 .tar** for ANSR® is available. This update will make sure that you have the most recent tests available to be used on your ANSR system. A USB jump flash drive, reference SKU: **ANSR-USB**, contains the updated file as does the FTP site: **ftp://ansrguest:Guest@ftp.neogen.com/ANSRUpgrade.zip**.

Prior to installing the test type package update, **ANSR 20180315 .tar**, make sure the desktop/computer software version is v2.1.0.4 or later and the ANSR instrument firmware is v2.1.03 or later. For instruction on how to do those updates please see the Neogen® ANSR Firmware/Software Upgrade Quick Reference guide that utilizes the same FTP site or USB drive as described above.


Installation

1. Start the ANSR laptop. Download the update from the FTP site or insert the USB drive containing the updated file into the computer. Make sure to denote where the **ANSR 20180315 .tar** file is on the computer.


2. After connecting the ANSR machine to the ANSR laptop, make sure it is in **Remote Connection** mode. Select the **T16 ISO Desktop** icon and open the program.

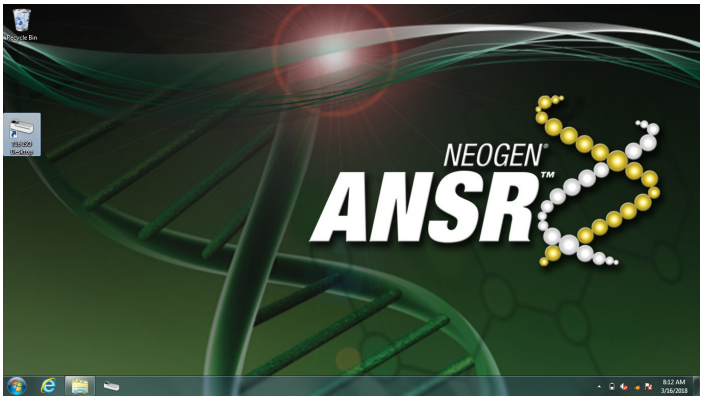


3. Select **Support** from the top menu bar.

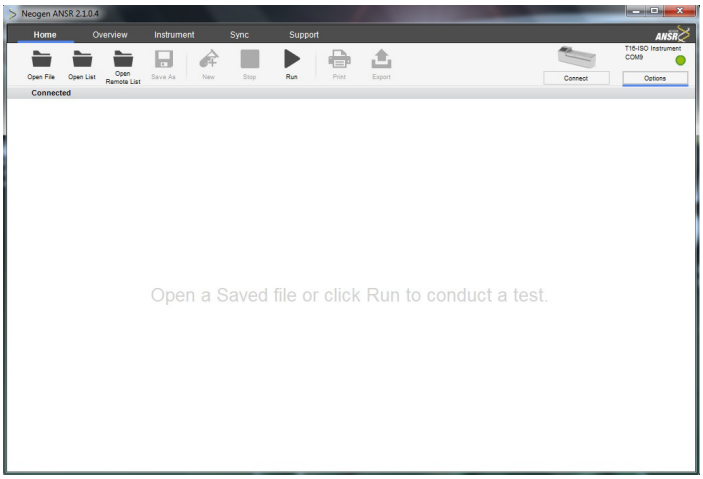


4. Select **Import** from the menu bar under the top menu bar.

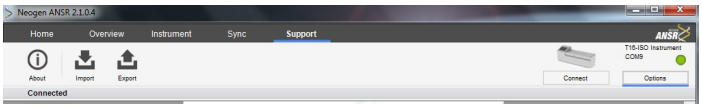

5. Select the location where you stored the **ANSR 20180315 .tar** file from the left menu, then select the file **ANSR 20180315 .tar**, then click **Open**.

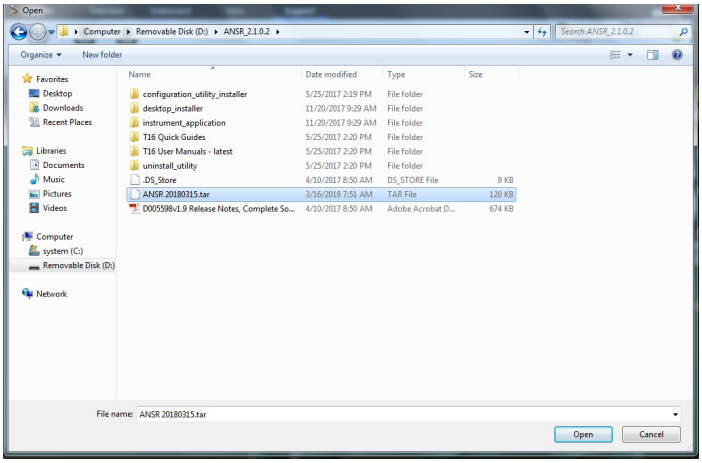

6. A popup will appear. Click **OK**.

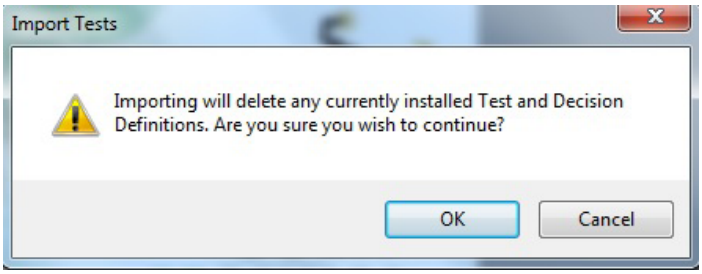


NEOGEN®




NEOGEN ANSR

Test Type Package Update

7. A few moments later another popup menu will appear. Click **OK**.

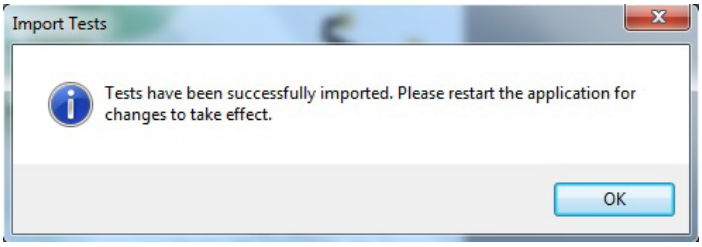


8. To complete the installation you will need to restart the program. You need to disconnect the ANSR machine first. In the upper right corner click on **Options** and then **Disconnect**.

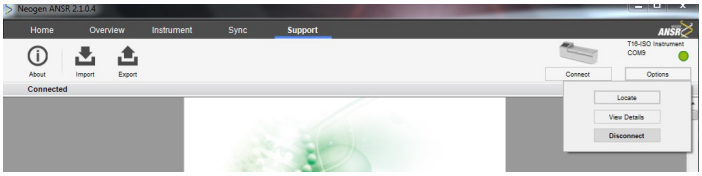


9. Close out of the ANSR program. Make sure the ANSR machine is still in **Remote Connection** mode, then select the **T16 ISO Desktop** icon and open the program again.


10. Click **Connect** in the upper right corner.

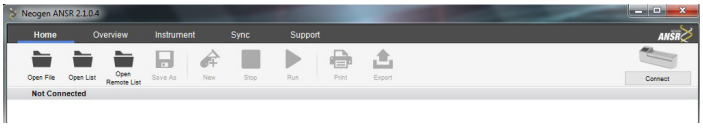

11. Click **Connect** next to **1 instrument available**. This is the middle connect option.

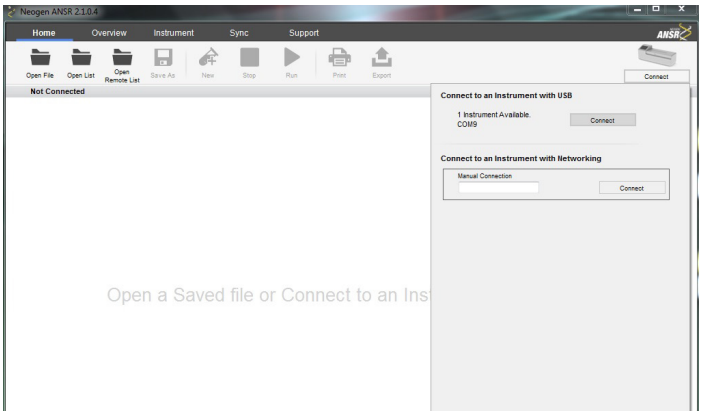

12. To confirm successful installation, click **Run**, then under the drop down menu for **select test type** you should see 8 options. If you see **9847 ANSR Standards** then the update was successful and this completes the update.

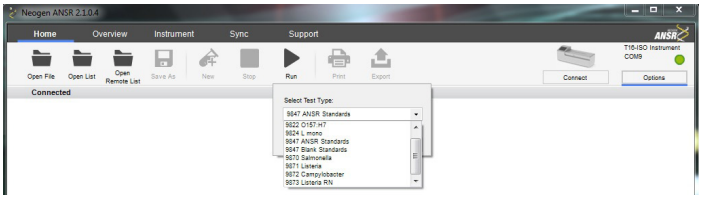

NEOGEN®
800-234-5333 (USA/Canada) • 517-372-9200
foodsafety@neogen.com • foodsafety.neogen.com

© Neogen Corporation, 2019. Neogen and ANSR are registered trademarks of Neogen Corporation, Lansing, Michigan, USA.