SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

현장을 이해하고, 필요한 솔루션을 연결합니다.

산업안전 · 추락방지 시스템
산업용 소재 · 건축자재
제품 제안부터 공급·시공·설치·교육까지



COMPANY INFORMATION

스냅슛 (SNAPSHOOT)

ADDRESS (15431) 경기도 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 301동 118호
TEL 0507-1374-9229
FAX 0504-481-6749
E-MAIL bkkim@snapshoot.co.kr

TECHNICAL DOCUMENTS

인증서 · 데이터시트 · 기술자료

제품의 규격과 성능, 인증 및 적용 조건을 확인하기 위한 자료입니다.

ABOUT SNAPSHOOT

제품 공급을 넘어, 현장에 맞는 해결책으로

스냅슛은 산업현장의 작업 환경과 요구 조건을 바탕으로
적합한 제품과 시스템을 제안합니다. 현장 실사를 통해 설치 조건을 확인하고,
공급부터 시공·설치 및 사용 교육까지 필요한 과정을 함께합니다.

추락방지 시스템

안전대부착설비 · 수평·수직 라이프라인
레일 시스템 · 리지드 포스트

밀폐공간 진입·구조 솔루션

데빗암 · 삼각대 · 구조용 윈치
윈치 안전블록 · 구조장비

산업안전 보호구

전신형 안전대 · 랜야드 · 안전블록
작업 환경에 맞춘 개인보호구


산업용 소재·건축자재

산업용 테이프 · 접착제 · 기능성 소재
구조용 스크류 · 목조건축 자재

SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

홈페이지 바로가기 →
문서 라이브러리 바로가기 →
시공사례 바로가기 →
문의하기 →

본 페이지는 스냅슛의 자료 제공 안내용 표지입니다. 첨부된 인증서 및 기술자료의 발행 주체, 인증 대상과 적용 범위는 해당 원문을 기준으로 확인해 주세요.

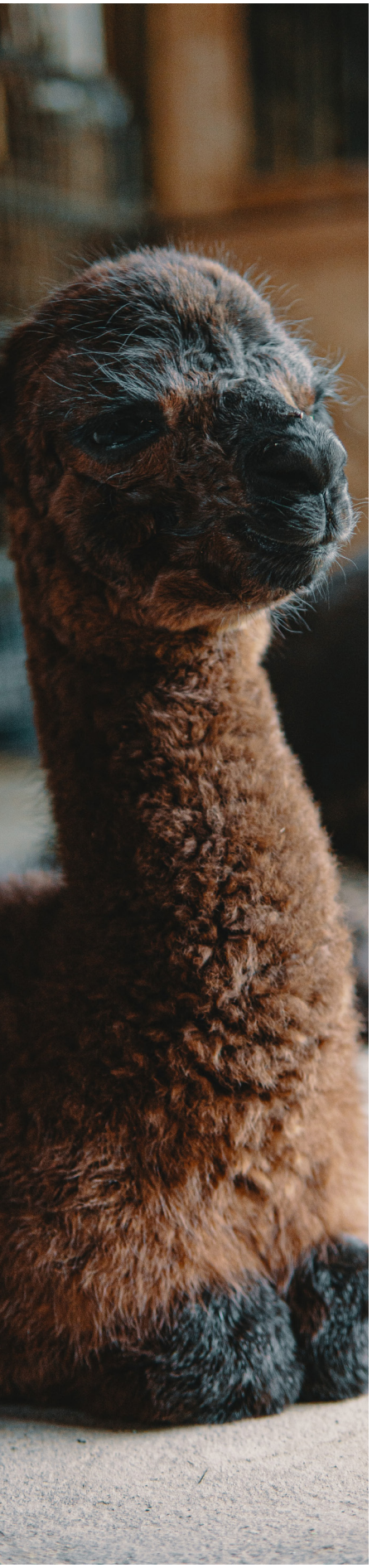

Alpaca Coat Colour Test

The Alpaca Coat Colour Test has been developed in collaboration with Dr. Kylie Munyard from Curtin University of Western Australia, who has conducted extensive research in the area of alpaca coat colour genetics.

Coat colour in Alpacas is a complex trait, involving two main genes responsible for base coat colour (AslP and MCIR), and an as yet unknown number involved with pattern. Alpaca fleece has 22 natural shades that ranges from black to white, grey, fawn to champagne. Breeding for a specific coat colour can be a complex process.

The 'classic grey' phenotype can be problematic in breeding due to its association with the blue eye white phenotype & associated possible health defects. Classic grey can be hidden or cryptic on white or light backgrounds.

With the release of the Alpaca Coat test, breeders have the opportunity to test their white or light fawn animals, those with uncertain patterns or mutations or animals they wish to determine the base coat colour to deduce common progeny colours. The test also identifies animals with 'cryptic grey' coat patterns that are generally too pale to see.

Example of Results

Breeders will receive a grey or non-grey status for tested animals, as well as a base coat phenotype for the following colours:

Base Colour Codes		
W	White	White fibre, Dark skin
PSW	Pink Skinned White	White fibre, Pink skin
F	Fawn	Fawn fibre, Dark skin
CF	Clear Fawn	Fawn fibre, Pink skin
BB	Bay/Brown	Red/Brown body fibre, Black fibre on extremities, Black skin
CH	Chestnut	Red/Brown fibre, Pink to Red/Brown
B	Black	Black fibre and skin

Collection Methods

There are 2 main methods of collection

Blood Cards

A small amount of blood collected onto a blood card. If using blood cards, it is suggested that collecting blood from the inside of the lower lip yields a more successful sample, than from the ear.

Tissue Sample Units (TSU)

TSUs would require the collection of a small ear notch from the center of the animal's ear, that self-seals into a collection tube. TSUs tend to be a more efficient and effective method of collection.

Contact Information

For further information, please contact NEOGEN Canada at 1.855.324.9774 or email us at neogencanada@neogen.com

NEOGEN.com

© NEOGEN Corporation, 2021. NEOGEN is a registered trademarks of NEOGEN Corporation, Lansing MI, 48912 U.S.