SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

현장을 이해하고, 필요한 솔루션을 연결합니다.

산업안전 · 추락방지 시스템
산업용 소재 · 건축자재
제품 제안부터 공급·시공·설치·교육까지



COMPANY INFORMATION

스냅슛 (SNAPSHOOT)

ADDRESS (15431) 경기도 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 301동 118호
TEL 0507-1374-9229
FAX 0504-481-6749
E-MAIL bkkim@snapshoot.co.kr

TECHNICAL DOCUMENTS

인증서 · 데이터시트 · 기술자료

제품의 규격과 성능, 인증 및 적용 조건을 확인하기 위한 자료입니다.

ABOUT SNAPSHOOT

제품 공급을 넘어, 현장에 맞는 해결책으로

스냅슛은 산업현장의 작업 환경과 요구 조건을 바탕으로
적합한 제품과 시스템을 제안합니다. 현장 실사를 통해 설치 조건을 확인하고,
공급부터 시공·설치 및 사용 교육까지 필요한 과정을 함께합니다.

추락방지 시스템

안전대부착설비 · 수평·수직 라이프라인
레일 시스템 · 리지드 포스트

밀폐공간 진입·구조 솔루션

데빗암 · 삼각대 · 구조용 윈치
윈치 안전블록 · 구조장비

산업안전 보호구

전신형 안전대 · 랜야드 · 안전블록
작업 환경에 맞춘 개인보호구

산업용 소재·건축자재

산업용 테이프 · 접착제 · 기능성 소재
구조용 스크류 · 목조건축 자재

SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW


홈페이지 바로가기 →
문서 라이브러리 바로가기 →
시공사례 바로가기 →
문의하기 →

본 페이지는 스냅슛의 자료 제공 안내용 표지입니다. 첨부된 인증서 및 기술자료의 발행 주체, 인증 대상과 적용 범위는 해당 원문을 기준으로 확인해 주세요.

Speed and Simplicity

Next-Day Qualitative Pathogen Testing

Neogen® Molecular Detection System™

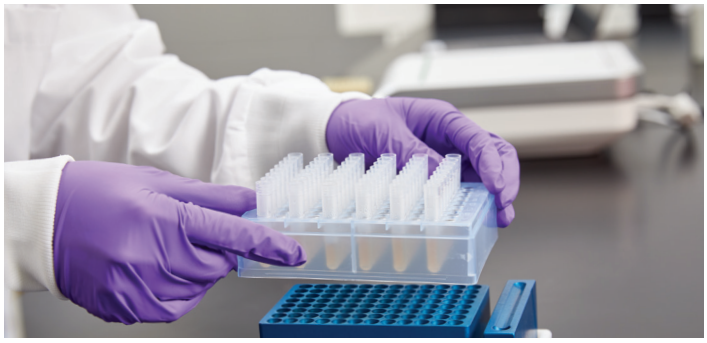





Neogen Molecular Detection Assays 2 (MDA 2)

Each assay contains two main components:

Ready-To-Use Reagent Tubes

- Single post-enrichment assay protocol helps improve productivity
- Detects 1-5 CFU of target pathogen per original sample

Ready-To-Use Lysis Solution

- Advanced chemistry based on nanotechnology
- Color-change process control for increased confidence in lysis step

User-Friendly Software

- Intuitive user interface for quick and easy setup
- All assays can be run simultaneously for optimal efficiency
- Real-time results help make critical decisions faster

Compact Instrument

- Space-saving design fits in any lab
- Flexibility to test up to 96 samples in each run
- Neogen provides global service with local support

Reagent tubes are color-coded by organism for easy identification:



Salmonella



Salmonella Enteritidis



Salmonella Typhimurium



E. coli O157 (including H7)



STEC Gene Screen (*stx* and *eae*)



Listeria spp



Listeria monocytogenes



Cronobacter



Campylobacter




STEC Gene Screen (*stx*)

How it works

Neogen uses advanced technologies, Isothermal DNA Amplification and Bioluminescence Detection, to bring you the next generation of Molecular Detection Assays for an accurate, reliable molecular solution with increased productivity. Allowing you to make critical decisions faster, streamline your process and protect your business, and your bottom line.

Isothermal DNA Amplification | **Bioluminescence Detection**

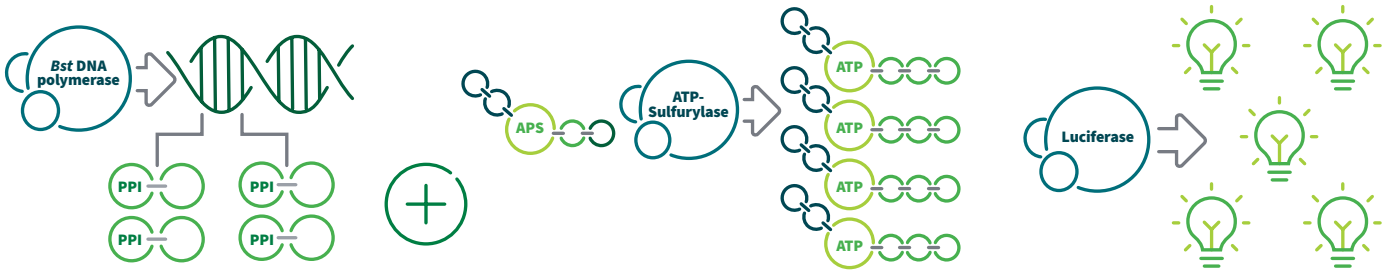

Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) is driven by robust *Bst* DNA polymerase, using six different primers for high specificity.

Exponential generation of Pyrophosphate (PPi) is converted to Adenosine Triphosphate (ATP) by ATP-Sulfurylase.

Luciferase uses ATP to generate light, providing real-time detection in as little as 15 minutes.

Ordering Information

Cat. No.	Description	Quantity	SKU
MDA2SAL96	Neogen® Molecular Detection Assay 2 – *Salmonella*	96 Tests/Kit	700002157
MDA2SEST48	Neogen® Molecular Detection Assay 2 – *Salmonella Enteritidis/Typhimurium*	48 Tests/Kit	700006585
MDA2LIS96	Neogen® Molecular Detection Assay 2 – *Listeria*	96 Tests/Kit	700002150
MDA2LMO96	Neogen® Molecular Detection Assay 2 – *Listeria monocytogenes*	96 Tests/Kit	700002149
MDA2ECO96	Neogen® Molecular Detection Assay 2 – *E. coli* O157 (including H7)	96 Tests/Kit	700002229
MDA2CRO96	Neogen® Molecular Detection Assay 2 – *Cronobacter*	96 Tests/Kit	700002257
MDA2CAM96	Neogen® Molecular Detection Assay 2 – *Campylobacter*	96 Tests/Kit	700002283
MDA2STX96	Neogen® Molecular Detection Assay 2 – STEC Gene Screen *(stx)*	96 Tests/Kit	700002333
MDA2STXEAE48	Neogen® Molecular Detection Assay 2 – STEC Gene Screen *(stx* and *eae)*	48 Tests/Kit	700002334
MDMC96	Neogen® Molecular Detection Matrix Control	96 Tests/Kit	700002079
CE250	Neogen® Campylobacter Enrichment Broth 250 g	1/Bottle	700002285
BPW500	Neogen® Buffered Peptone Water (ISO) 500 g	1/Bottle	700002269
BPW025	Neogen® Buffered Peptone Water (ISO) 2.5 kg	1/Bottle	700002268
BPW010	Neogen® Buffered Peptone Water (ISO) 10 kg	1/Bottle	700002266
QEBPWI225F	Neogen® Enrichment Pouch, Buffered Peptone Water (ISO) with Filter 225 mL	32/Case	700002156
QEBPWIS225	Neogen® Enrichment Pouch, Buffered Peptone Water (ISO) without Filter 225 mL	32/Case	700002254
BP0118500	Neogen® Demi Fraser Broth Base 500 g	1/Bottle	700002158
BP0118005	Neogen® Demi Fraser Broth Base 2.5 kg	1/Bottle	700002160
BP0220010	Neogen® Fraser Broth Supplement 10 mL	10/Case	700002053
SSL10LET	Neogen® Sponge Stick with Letheen 10mL	100/Case	700002109
ESS10WSN	Neogen® Environmental Scrub Sampler Stick with Wide Spectrum Neutralizer 10 mL	100/Case	700002338
HES10WSN2G	Neogen® Environmental Scrub Sampler with Wide Spectrum Neutralizer and Gloves 10 mL	100/Case	700002337
ENVSWB100	Neogen® Enviro Swab	100/Case	700002282

Learn more at: **info.neogen.com/MDS**

NEOGEN®

Neogen Corporation, 620 Lesher Place, Lansing, MI 48912 USA.
© Neogen Corporation 2025. All rights reserved. Neogen is a registered trademark of Neogen Corporation.